

# 大特価

売れています

## 液化窒素容器

### 保管・運搬・分注用

非磁性  
磁場環境対応

軽量・小型  
手軽に運べて収納もすっきり!

ここが便利!  
開放容器なので  
定期的な法定点検は不要



液化窒素容器 5 分離式台車 標準付属  
液化窒素容器 10 分離式台車 標準付属  
液化窒素容器 20 分離式台車 標準付属  
液化窒素容器 30 分離式台車 標準付属

従来品と比べ、軽量化を実現

女性でも動かせる  
台車があるのが便利

## 100リットルの大容量

ステンレス

衝撃に強い  
ステンレスを使用




ここが便利!

キャスター付(ストッパー付)

### シーベル100S

仕様	
製品番号	BJ-CB100S
製品名	液化窒素容器100S
容量 ℓ	100
高さ cm	112
外径 cm	60
口径 cm	2.8
内深 cm	83
空重量 kg	68
蒸発量 %/day	0.6
台車	固定式
価格(税抜) お問い合わせ	
材質:外槽、内槽共にSUS	

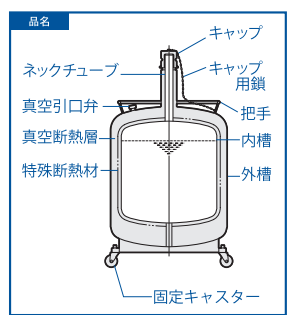

蒸発量  
スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。  
液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。

液化窒素の取り出し  
液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取り出しできます。

仕様	材質・外槽Al / 内槽SUS	台車	価格(税抜)
製品番号	製品名	容量 ℓ	蒸発量 %/day
BJ-CB05	液化窒素容器 5	5	4.0
BJ-CB10	液化窒素容器 10	10	2.1
BJ-CB20	液化窒素容器 20	20	1.2
BJ-CB30	液化窒素容器 30	30	1.5
BJ-CB50	液化窒素容器 50	50	1.1
※分離式台車 ①BJ-1005 ¥32,000 ②BJ-1006 ¥32,000 ③BJ-1007 ¥35,000			

## 液化窒素の取り出しはバルブ操作だけ!

## 液化窒素自加圧容器

液化窒素の取り出し  
外部から加圧することなく、簡単なバルブ操作だけ!  
フレキシブルホースが標準付属

ここが便利!

標準付属  
120以上には、フロート液面計が標準付属されています。(仕切栓(仕切ブラク)に変更可能です)  
●50・50sはオプションです

### セルフアー

キャスター付(ストッパー付)



製品番号	製品名	価格(税抜)
BJ-SP50	鉄製 液化窒素自加圧容器50	¥420,000
BJ-SP50S	ステンレス製 液化窒素自加圧容器50S	¥530,000
BJ-SP120	鉄製 液化窒素自加圧容器120	¥540,000
BJ-SP120S	ステンレス製 液化窒素自加圧容器120S	¥690,000
BJ-SP250	鉄製 液化窒素自加圧容器250	¥820,000
BJ-SP250S	ステンレス製 液化窒素自加圧容器250S	¥940,000

仕様	鉄製	ステンレス製	単位	BJ-SP50	BJ-SP120	BJ-SP250
充填量	ℓ			42	100	210
蒸発損失(液化窒素)	ℓ/day			1.5	2.1	2.5
	%/day			3.0	1.7	1.0

選べる  
鉄製 & ステンレス製

# 液化窒素取出装置

簡単に液を取り出すことができます


## クライオトロール

トロール用サイフォン

ポイント

開放容器なら何でもOK

お手持ちの液化窒素容器から簡単に自動で液化窒素を取り出せます

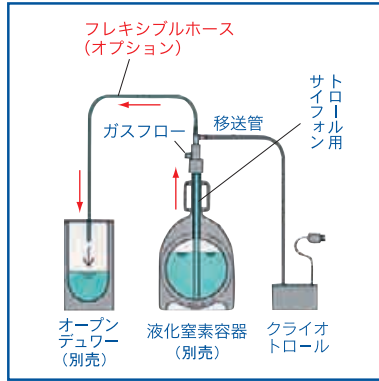

スイッチひとつで自動的に液を取り出すことができます

仕様			
電源	AC100V	寸法	230×122×145 mm
吐出量	700cc/min	重量	5.7 kg

吐出量は状況により変動する場合があります

体験下さい  
**デモ  
承ります**


製品名	価格 (税抜)
①クライオトロール本体 BJ-CT700	¥257,000
②トロール用サイフォン(5/10/20/30/50用)	¥93,000

## クライオジェット

シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です

フレキシブルホースはオプションです


ゴム球を数回押し  
液化窒素を  
取り出します

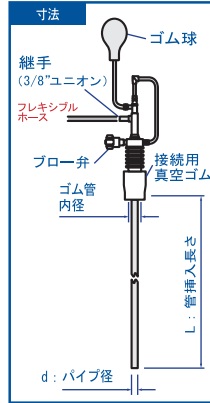

製品名	クライオジェット本体				
製品番号	BJ-CJ5	BJ-CJ10	BJ-CJ20	BJ-CJ30	BJ-CJ50
取付容器容量 ℓ	5	10	20	30	50
ゴム管内径 mm	18	18	18	25	25
パイプ径(d) mm	15	15	15	15	15
管挿入部長さ(L) mm	455	520	590	590	820
価格 (税抜)	¥62,000	¥62,000	¥68,000	¥72,000	¥77,000

## オプション 液化窒素取出装置用フレキシブルホース

(ステンレス製移送管)

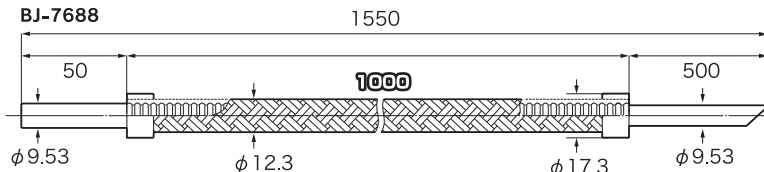

材質: 全SUS304 ●フレキ長1500mmのBJ-7689もございます。(3/8"ユニオンにて取り付けられます)

安全性の高いステンレス製の移送管です

●クライオジェット・サイフォン、クライオトロール共通のフレキシブルホースです。

製品番号	製品名	価格 (税抜)
BJ-7688	フレキシブルホース (1.0m/全長1.5m)	¥35,000
BJ-7689	フレキシブルホース (1.5m/全長2.05m)	¥35,000

## 液体窒素関連アクセサリ

### 極低温作業用手袋

長時間の作業でも固くなりにくい

- クライオグローブ
- 軽量で作業性が高く、快適
- 袖口を縛るためのマジックテープ付
- 耐水性あり



製品番号	D-08M (Mサイズ)	D-09L (Lサイズ)
価格 (税抜)	¥15,000	¥15,000

### アルミ製ロート

液体窒素の移し替えに便利

- 容器に応じて挿入部は2種類ご用意しています

製品番号	MYS-15R	MYS-25R
挿入部 (直径)	15mm	25mm
価格 (税抜)	¥46,000	¥46,000



●製品の価格及びデザイン・仕様等は改良の為変更される場合がございます

●製品はすべて試験研究用です

●表示価格には消費税は含まれておりません



株式会社 **バイオメディカルサイエンス**  
 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町530  
 TEL 03-6205-5310 FAX 03-6205-5311  
<https://www.bmsci.com>  
 お問い合わせ ✉ info@bmsci.com