

Made in Japan


1粒の種を確実に真空ポンプで吸い上げる



⑥高圧型吸引ポンプ


# バキューシード Vacuseedシリーズ が完全リニューアル!

銘機復活

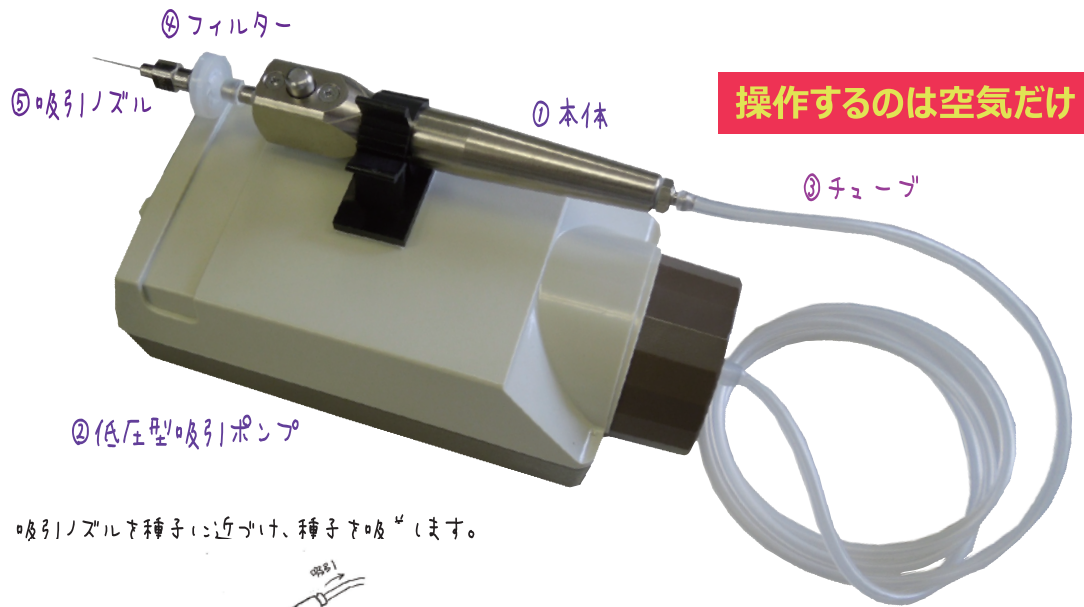


操作するのは空気だけ!

吸引ノズルを種子に近づけ、種子を吸い上げます。

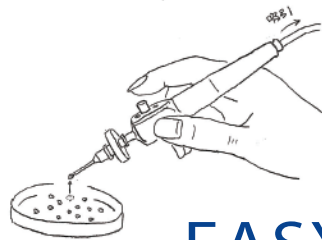


EASY

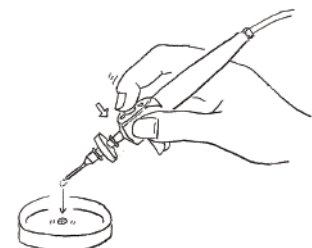

押しボタンを押すと、種子を離します。


### 使用例

○シロイマナズナ・・・約0.5×0.2mm

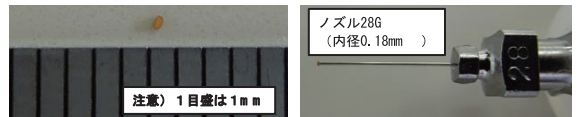

低圧型ポンプ

○タバコ・・・約0.6×0.9mm

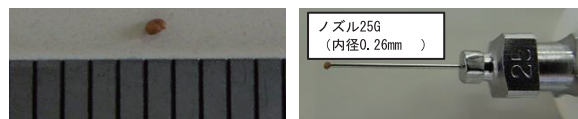

低圧型ポンプ

○ナデシコ・・・約1.5×2~1.9×2.7mm




低圧型ポンプ

○ホウレンソウ(農薬コーティング品)・・・約3.0×3.0×1.6mm



低圧型ポンプ

○米(イネ)・・・約3.0×5.0×2.0mm(重さ約0.02g)

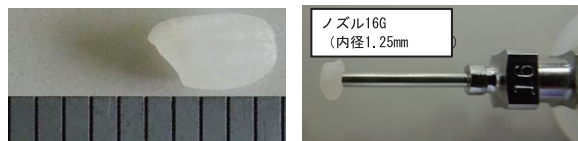

高圧型ポンプ

## シードピッカー 低圧型タイプ BC-SDP01 ¥65,000 (税抜)

- ①本体②低圧型吸引ポンプ③チューブ (1m ※1) ④フィルター(5個)
- ⑤吸引ノズル(各1本合計4本: 内径0.19mm【27G】、内径0.26mm【25G】、内径0.51mm【21G】、内径0.1.25mm【16G】※2)

## シードピッカー 高圧型タイプ BC-SDP02H ¥98,000 (税抜)

- ①本体⑥高圧型吸引ポンプ③チューブ (1m ※1) ④フィルター(5個)
- ⑤吸引ノズル(各1本合計4本: 内径0.19mm【27G】、内径0.26mm【25G】、内径0.51mm【21G】、内径0.1.25mm【16G】※2)

(※1) チューブ長さの延長につきましては別途ご相談ください。  
 (※2) 吸引ノズルのサイズ違いをご要望の方は別途ご相談下さい。



株式会社 バイオメディカルサイエンス  
 〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-39  
 TEL 03-3513-5242 FAX 03-3513-5243

<http://www.bmsci.com>

お問合せ ☒ [info@bmsci.com](mailto:info@bmsci.com)